

maxgraft® bonering cerrahi seti

Bu cerrahi seti ile botiss firması maxgraft® bonering tekniđi uygulan- masında gerekli tüm aletleri sağlamaktadır.

Setin içinde her iki maxgraft® bonering materyaliyle aynı çapta olan iki farklı büyüklükte trepan bulunmaktadır. Planator lokal kemiđin kaplamasına izin vererek implant alanında uygun ve taze temas yüzeyi oluşturulmasını sağlar. Trepan ve planator pilot deliciyle mükemmel uyumludur. Lokal kemikte mükemmel uyum ve düzelmiş yu-

muşak doku iyileşmesi için elmas disk ve elmas rond frez, maxgraft® bonering'i istenilen şekilde deđiş- tirmek için kullanılır. Hepsi birlikte bu aletler maxgraft® bonering'in kemik içine doğru büyümesi için optimal ön koşullara izin verir. Tüm aletler Almanya'da yüksek kaliteli cerrahi çelikten üretilmiştir.



maxgraft® bonering cerrahi seti

Kod numarası	Miktar
33000	1x Trepan frez 7mm 1x Trepan frez 6mm 1x Planator 7mm 1x Planator 6mm 1x Elmas disk 10mm 1x Elmas rond frez 3mm


The maxgraft® bonering surgical kit will be delivered in an autoclavable instrument rack.




Trepan frez
7mm



Trepan frez
6mm

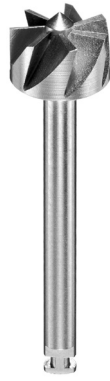

Planator
7mm

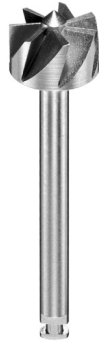

Planator
6mm



Elmas disk
10mm



Elmas rond frez
3mm

bonering fix

Kod numarası	Miktar
33010	1x bonering fix



bonering fix

BOTISS DENTAL

Tıbbi Malzemeler Dış Tic. A.Ş
Halaskargazi Mah. Rumeli Cad. No: 25 Kat 2 D:4
34371 Şişli - İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: +90 (212) 234 8315-16

Faks: +90 (212) 234 8317

info@botiss.com.tr

www.botiss.com.tr